

Prestan[®]

AED UltraTrainer™



Za nadaljnjo uporabo si spodaj zapomnite pooblaščenega distributerja Prestan, kjer ste kupili lutke. Za vprašanja o izdelku, naročanje delov/dodatkov ali garancijskih vprašanj pokličite pooblaščenega distributerja Prestan

MEDICAL 4 d.o.o.
Prestan distributer

041-795-950
Telefon distributerja

Datum nakupa

Prestan AED UltraTrainer™



Model PP-AEDUT-101 —> **Prestan AED UltraTrainer** (Potrebuje tri (3) 'C' baterije; niso priložene) vnaprej programiran z angleščino/slovenščino, en par ploščic odrasel/otrok za vadbo (predhodno nameščene), par dodatnih zatičev za konektor in najlonska torbica za prenašanje.



Model PP-AEDUT-401 —> **Prestan AED UltraTrainer 4-Pack** (Potrebuje dvanajst (12) 'C' baterij; niso priložene) vnaprej programiran z angleščino/slovenščino, štiri pari ploščic odrasel/otrok za vadbo (predhodno nameščene), štiri pari dodatnih zatičev za konektor, 4 posamezne najlonske torbice za prenašanje in 4-paket najlonska torba za prenašanje.



ZAČNITE TUKAJ

- Ta navodila za uporabo uporabite kot referenco za Prestan AED UltraTrainer in dodatke.
- **Opozorilo:** Prestan AED UltraTrainer je namenjen samo treningom. **NI** avtomatiziran zunanji defibrilator (AED) in ne bo povzročil šoka. Da se izognete zmedi, je **NIKOLI** ne smete držati na istem območju z AED.
- Podatki o lastniku - Za nadaljnjo uporabo si zapišite na kartico za hitri začetek pooblaščenega distributerja Prestan, kjer ste kupili trener AED, in ga hranite pri svoji enoti. Glede vprašanj o izdelku, preurejanju delov / dodatkov ali garancijskih vprašanj se obrnite na pooblaščenega distributerja Prestan.
- Za informacije o Prestanovih pooblaščenih distributerjih, navodila za pomoč, vire in drugo obiščite spletno mesto Prestan na www.prestanproducts.com.

Lastnosti Prestan AED UltraTrainer


- Visoko zmogljive ploščice za vadbo
 - ⇒ Jasna anatomska grafika namestitve
 - ⇒ Lepilo za dolgo življenjsko dobo
 - ⇒ Dobro se oprime vseh lutk in ne pušča
 - Sledi lepila
 - ⇒ Edinstven priključek za ploščice s fiksiranjem priključka
- Sistem za zaznavanje ploščic
 - ⇒ Blazinice so predhodno nameščene
 - ⇒ Zaznavanje ploščic na lutki
 - ⇒ Daljinski upravljalnik ni potreben
 - ⇒ Ne potrebuje zunanjega vira elektrike
 - ⇒ Deluje na vseh lutkah
- Zaščitni pladenj za večkratno uporabo
- Gumb za izbiro načina odrasel/otrok
- Svetlo osvetljen gumb za šok
 - ⇒ Utripa, ko se pripravlja na šok
- Gumb vklop/izklop s osvetljenim indikatorjem
- Možnost premora programa
- Pet scenarijev za vadbo
- Jasni in umirjeni glasovni pozivi
- Metronom stiskanja prsnega koša
 - ⇒ Metronom je mogoče vklopiti in izklopiti
 - ⇒ Metronom zvočno opozori pri 10, 20 in 30 pritiskih
- Avtomatska ali polavtomatska dostava šoka
- Možnost vklopa ali izklopa časa za vpihe po sklopu stiskov prsnega koša
- Dolga življenjska doba baterije
 - ⇒ Zvočno opozorilo za prazno baterijo
 - ⇒ Avtomatični izklop podaljša življenjsko dobo
- Odporen na vodo in brizge
- Programiranje je skladno s trenutnimi smernicami AHA (2015)

ODRASEL/OTROK VADBENE PLOŠČICE


- Kabli za priključek so predhodno nameščeni na AED trainer
- Sistem za zaznavanje blazinic samodejno sporoči enoti, kdaj so blazinice povezane z lutko
- Blazinice prenesejo več kot 100 uporab.
- Edinstvena zamenjava blazinic (glej razdelek o montaži)
- Blazinice so nameščene v priročnem ohišju



VODIČ LASTNOSTI

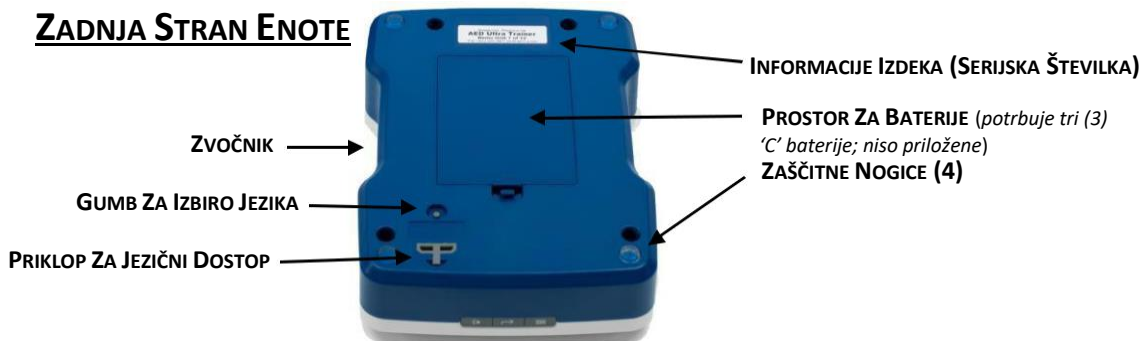

AKTIVACIJSKI GUMBI

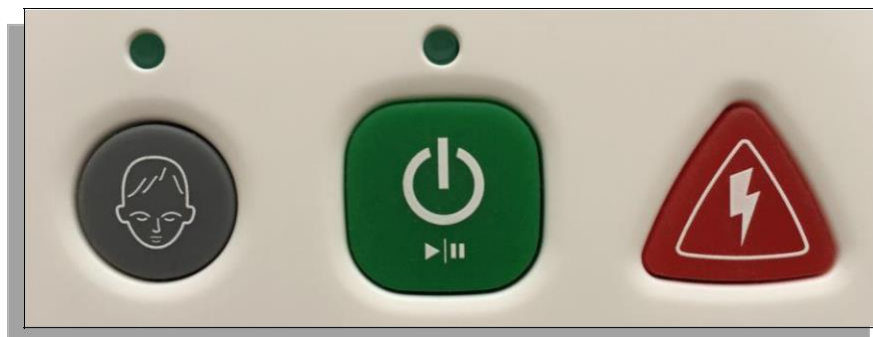

GUMB OTROK

VKLOP/IZKLOP/PREMOR

GUMB ŠOK

TIPKA OTROK

- Ko je napajanje vklopljeno, naprava zvočno možnost za izbiro načina Otrok
- Kazalna lučka nad tipko zasveti, ko je bil izbran način Otrok in je aktiven
- Kazalna lučka se izklopi, če je program zaustavljen, vendar se ob nadaljevanju programa vklopi.


TIPKA VKLOP/ IZKLOP / PREMOR

1. Pritisnite zeleno tipko, da zaženete program / lučka nad tipko se prižge
2. Ponovno pritisnite zeleno tipko, da zaustavite program / indikator utripa / pritisnite zeleno tipko za ponovno nadaljevanje programa
3. Ko enota deluje, pritisnite in držite tipko 3 sekunde, da enoto izklopite

TIPKA ŠOK

- Rdeči gumb šok prične utripati, ko program naroči, da odda šok
- V polavtomatskem načinu s pritiskanjem na gumb med tem ko utripa, preneha utripati in program se nadaljuje
- V avtomatskem načinu bo gumb šok približno 6-krat utripnil, preden bo avtomatsko dodal šok in nadaljeval s programom

TIPKE ZA NASTAVITEV

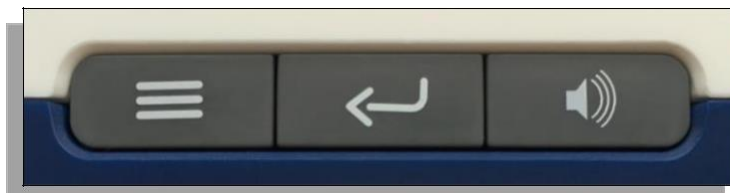

TIPKA MENI

TIPKA IZBIRA

TIPKA GLASNOST

TIPKA MENI

Gumb menu omogoča prilagoditev 4 možnosti, ki jih lahko kadar koli uporabite. Večkrat pritisnite tipko Meni, da se pomaknete in slišite vsako trenutno aktivno izbiro za vsako od možnosti (glejte 1-4 spodaj). Uporabite gumb za izbiro, da se pomaknete in spremenite te možnosti.

TIPKA IZBIRE

Z gumbom Meni spremenite nastavitve za vsako od štirih možnosti menija. Večkrat pritisnite izbirno tipko, da slišite trenutni izbor in se pomaknete na naslednjo. Ko zaslišite željeno možnost, preprosto prenehajte s pritiskom na gumb in izbira bo ostala aktivna. Za potrditev izbire se sliši pisk.

1. Razpoložljivi scenariji usposabljanja:
 - a. Scenarij 1 > Šok / Šok / Šok (priveto)
 - b. Scenarij 2 > Šok / Brez šoka / Brez šoka
 - c. Scenarij 3 > Brez šoka / Brez šoka / Brez šoka
 - d. Scenarij 4 > Šok / Brez šoka / Šok
 - e. Scenarij 5 > Šok / Šok / Brez šoka
2. Polavtomatski / Avtomatski preklop
 - a. Polavtomatski > Študent mora pritisniti utripajočo tipko za šok, da ustvari šok (privzeto)
 - b. Avtomatsko > Enota bo dodala šok, ko je osvetljen gumb za šok
3. Preklop vpihovanja
 - a. Vpihovanje Vklop > V scenarijih je predviden čas za vpihovanje (privzeto)
 - b. Vpihovanje Izklop > V scenarijih ni predvidenega časa za vpihovanje
4. Preklop metronoma
 - a. Metronom Vklop > Slišijo se zvočni signali za ritem stiskanja prsnega koša
 - b. Metronom Izklop > Med časom za stiskanje prsnega koša se ne sliši signalov

Glejte graf na strani 7 za interakcijo vpihovanja in metronoma.

TIPKA ZA GLASNOST

- Preklop 3 stopenj glasnosti
- Deluje neodvisno od tipke za meni in tipke za izbiro

NASTAVITE ZNAČILNOSTI



	Vpihovanje Vključeno	Vpihovanje Izključeno
CPR Metronom Vključen	1. Program se začne z analizo pacienta in svetuje ali priporoča šok glede na izbran scenarij v nastavitvah 2. Začne se zvočni opomin "Začnite z oživljanjem" začne se cikel kompresij 3. Metronom bije in govori opombe »DESET«, »DVAJSET« in šteje se tretje stiskanje »TRIDESET« 4. Po 30 stiskih se metronom ustavi naprava dodeli navodila »DODAJ DVA VPIHA«. 5. Stiskanje in vpihovanje se ponovi 5 ciklov (2 minute). 6. Enota analizira pacienta. 7. Cikli se ponavljajo v nedogled dokler enote ročno ne izključite	1. Program se začne z analizo pacienta in svetuje ali priporoča šok glede na izbran scenarij v nastavitvah 2. Začne se zvočni opomin "Začnite z oživljanjem" začne se cikel kompresij 3. Kompresijski utripi z zvočnim pozivom "Nadaljuj z oživljanjem" vsakih 24 sekund (x4). 4. Kompresijski utripi se nadaljujejo 2 minute. 5. Enota analizira pacienta. 6. Cikli se ponavljajo v nedogled dokler enote ročno ne izključite
CPR Metronom Izključen	1. Program se začne z analizo pacienta in svetuje ali priporoča šok glede na izbran scenarij v nastavitvah 2. Začne se zvočni opomin "Začnite z oživljanjem" začne se cikel kompresij 3. Naprava glasovno sporoča »DESET« »DVAJSET« in »TRIDESET« šteje kompresije. 4. Po 30 stiskih se metronom ustavi naprava dodeli navodila »DODAJ DVA VPIHA«. 5. Stiskanje in vpihovanje se ponovi 5 ciklov (2 minute). 6. Enota analizira pacienta. 7. Cikli se ponavljajo v nedogled dokler enote ročno ne izključite	1. Program se začne z analizo pacienta in svetuje ali priporoča šok glede na izbran scenarij v nastavitvah 2. Začne se zvočni opomin "Začnite z oživljanjem" začne se cikel kompresij 3. Tišina razen zvočni opomnik "Nadaljuj z oživljanjem" vsakih 24 sekund (x4). 4. Cikel se ustavi po 2 minutah 5. Enota analizira pacienta. 6. Cikli se ponavljajo v nedogled dokler enote ročno ne izključite

NAVODILA ZA NEGO IN ČIŠČENJE


1. Shranjujte Prestan AED UltraTrainer v ohišju in na hladnem in suhem prostoru.
2. Vadbene blazinice in kable vrnite v ustrezne vrečke za shranjevanje, ki se nahajajo v notranjem pokrovu pokrova enote. Če so blazinice in kabli zloženi nad enoto, se lahko na kablích odtisnejo utori / vdolbine na površini blazinic.
3. Za takojšnjo uporabo enote so nameščene zaganjalne baterije. Začetne baterije je treba v mesecu dni po nakupu zamenjati s kakovostnimi alkalnimi baterijami. Če enoto hranite dlje časa, odstranite baterije za zaščito pred korozijo.
4. Nikoli ne dvigajte in ne nosite enote za kable.
5. Prestan AED Ultra Trainer naj bo čist. Če postane umazan, ga preprosto obrišite s čisto, vlažno, mehko krpo. Če je Trainer zelo umazan lahko pazljivo uporabite navadna čistila, vendar s čim manj drgnjenja, da ohranite življenjsko dobo enote. Ne potopite enote pod vodo.

MENJAVA BLAZINIC

1. Prestan Training blazinice po navadi zdržijo približno 100 uporab.
 2. Kadar je potrebna menjava blazinic je dobro, da obe blazinici zamenjate hkrati.
 3. Sprostite obstoječe blazinice iz sivih priključkov kabla tako, da izvlečete črna zatiča s konico svinčnika.
 4. Izvlecite blazinice iz kabljskega priključka.
 5. Vstavite nove blazinice na kabljski priključek.
 6. Uporabite črna zatiča, da pritrdite blazinice na priključek.
- Vstavite blazinico v kabljski priključek (preverite, ali je grafika blazinice na isti strani kot velika glava priključka in da se kontaktni zatič tesno prilega vdolbini v priključku kabla)

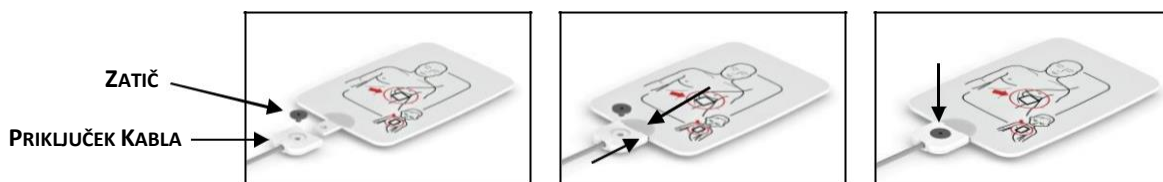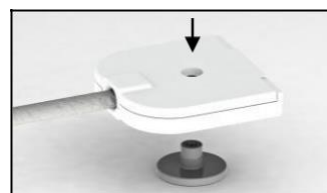

- Preverite, da blazinica ni obrnjena na glavo
- Če ima blazinica zaščitno podlago nad lepilom (nadomestne blazinice), jo odstranite in zavržite ter lepите blazinice na dvostransko ohišje blazinic

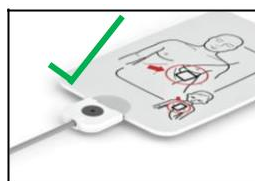

PRIPOROČLJIVE REŠITVE ZA TEŽAVE

SIMPTOMI	MOŽNE TEŽAVE IN KOMENTARJI	REŠITVE
Enota se ne prižge	- Enoto je potrebno vklopiti ročno - Baterije niso pravilno ustavljene - Ni baterij ali pa so prazne	- Pritisnite zeleno tipko - Pravilno ustavite baterije - Zamenjajte baterije
Obe blazinici sta položeni na lutko vendar naprava noče napredovati na analizo	- Operativna rešitev - Blazinica je obrnjena na glavo priključka kabla - Obrabljene blazinice ali lepilo	- Preverite da so blazinice trdno prilepljene na lutko, tako da se senzor na sredini blazinice dotika površine lutke - Potisnite ven črni zatič in obrnite blazinico in vstavite črni zatič - Zamenjajte blazinice (100 uporab)
Naprava začne analizo preden sta obe blazinici nameščeni na lutko	- Blazinici nista pravilno nameščeni na pladenj - Preverite, da se blazinici ne dotikajo stene	Ponovno namestite blazinice na pladenj tako da ležijo popolnoma ravno in se ne dotikajo stene
Naprava doda šok preden pritisnete tipko za šok	Naprava je v avtomatskem načinu	Zamenjajte način nazaj na polavtomatski
Naprava poziva »Zamenjaj Baterije«	Naprava deluje še 10 ur, na praznih baterijah	Zamenjajte baterije v roku 10 ur.
Naprava se nenadoma ugasne ali pa so glasovni pozivi popačeni	Baterije so zelo prazne ali popolnoma prazne	Zamenjajte baterije z novimi
Blazinica se izvleče iz priključka	Preverite če imate vstavljen črni zatič	Vstavite nov črni zatič
Blazinice se ne primejo lutke	Lepilo je obrabljeno	Zamenjajte blazinice (100 uporab)
Utori/ vdolbine se pojavljajo na zunanem delu blazinice	Kabli ustvarjajo utore v blazinice zaradi napačnega shranjevanja blazinic	Shranjujte blazinice in kable v namenjenih prostorih znotraj pokrova in v nosilni torbici

GARANCIJA

TRILETNA OMEJENA GARANCIJA

1. GARANCIJSKO ZAŠČITO Prestan (Proizvajalec) nudi OMEJENO GARANCIJO za kakršne koli napake v izdelavi ali materialih ob običajni uporabi glede na svoj PRESTAN AED ULTRATRAINER.
2. GARANCIJSKO OBDOBJE. Prestan jamči, da je PRESTAN AED ULTRATRAINER tri (3) leta od datuma nakupa. Vsak sestavni del PRESTAN AED ULTRATRAINER, ki se v tridesetih (36) mesecih od datuma nakupa pokaže na napako, bo lastnik brezplačno popravil ali zamenjal (po izbiri podjetja Prestan). Lastnik je odgovoren za pošiljanje in obdelavo pristojbin do kraja, ki ga določi Prestan.
3. ODGOVORNOSTI JAMSTVA Prestan bo popravil ali zamenjal (po izbiri podjetja Prestan) pokvarjen garancijski sestavni del v skladu z določbami oddelka 2 brezplačno, razen prevoznih stroškov. SAMOSTOJNI LASTNIKA IN EKSKLUZIVNO POROČILO PROTI PRESTANU BO ZA POPRAVILO ALI ZAMENJAVO POKVARJENEGA BLAGA, KI JIH JE PREDLOŽILO. Popravilo ali zamenjava katerega koli sestavnega dela katerega koli izdelka PRESTAN AED ULTRATRAINER ne omejuje te omejene garancije niti ne začne nove omejitvene dobe.
4. OKOLJSKO ZAKONSKO GARANCIJO IN DRUGE OMEJITVE
 - a. Prestan si pridržuje pravico do zavrnitve garancijskega servisa ali zamenjave, če je napaka izdelka posledica zlorabe, napačnega ravnanja, napačne uporabe, nesreče, zanemarjanja, nepravilne namestitve, spreminjanja, uporabe nepooblaščenih delov ali priključkov, prilagoditev ali popravil, ki jih izvaja kdo drug kot Prestan ali njegov pooblaščen agent ali kakršnih koli drugih vzrokov, ki niso okvarjeni izdelava ali material.
 - b. Ta omejena garancija ne zajema odrgnine, nenormalne uporabe, škode zaradi nepravilnega ravnanja, zanemarjanja ali nepooblaščenih sprememb. Ta garancija je neveljavna, če je PRESTAN AED ULTRATRAINER strukturno spremenjen.
 - c. Ta garancija ne zajema potrošnega materiala, kot so baterije, ki so priložene kot vljudnost ali podloge za vadbo, ki se uporabljajo preko njihove meje.
 - d. Za pridobitev storitve po tej omejeni garanciji mora lastnik predložiti dokazilo o datumu nakupa, kraju nakupa in kupnini.
 - e. Prestan ne jamči drugače, kot je navedeno v tem dokumentu. Noben zastopnik, zastopnik, trgovec ali uslužbenec Prestana nima pooblastila za spreminjanje obveznosti ali omejitev te omejene garancije.
5. OMEJITVE IZVEDBENIH GARANCIJ IN ŠKODE
 - a. Vse implicitne garancije za ULTRATRAINER PRESTAN AED, VKLJUČNO S KATERO VELJAVLJENO JAMSTVO PRODAJALNOSTI ALI PRIKLJUČNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, V TRAJANJU NI IZPOLNJIVO ODGOVORNI POGOJI TE OMEJENE GARANCIJE, KI SE ZAČNE OB DNEVU NAKUPA. Nekatere države ne dovoljujejo omejitev, kako dolgo traja implicitna garancija, zato zgornja omejitev morda ne velja za vas.
 - b. PRESTAN NI ODGOVOREN ZA NESREČE ALI POSLEDIŠČENE ŠKODE, KI SO SE ZGODILE PRI UPORABI PRESTANOVEGA ULTRATRAINERJA ALI KRŠITEV TEGA ALI DRUGIH IZJAVLJENIH ALI VELJAVLJENIH GARANCIJ. Nekatere države ne dovoljujejo izključitve ali omejitev naključnih ali posledičnih škode, zato zgornja omejitev ali izključitev za vas ne velja. Vsaka škoda, dodeljena za vsako kršitev te omejene garancije, je omejena na znesek kupnine.
6. GARANCIJSKI SERVIS. Če želite pridobiti garancijsko storitev, se obrnite na pooblaščenega distributerja Prestan ali za informacije o Prestanu obiščite naše spletno mesto na naslovu www.prestanproducts.com.
7. PRAVICE V DRŽAVNEM ZAKONU. Ta garancija vam daje posebne pravne pravice in morda imate tudi druge pravice, ki se razlikujejo od države do države.

DELI IN DODATKI

Glede cen in naročanja se obrnite na pooblaščenega distributerja Prestan




11678

Enojna torbica za nošenje AED UltraTrainer




11806

4-Paket nosilna torba za AED UltraTrainer

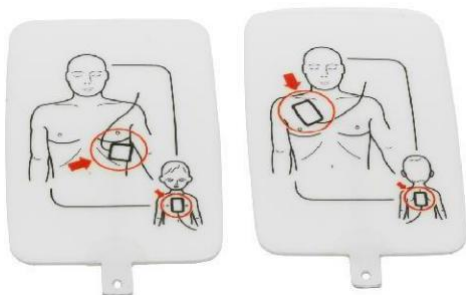


PP-UTPAD-1

Par blazinic za vadbo Odrasel/Otrok
za AED UltraTrainer

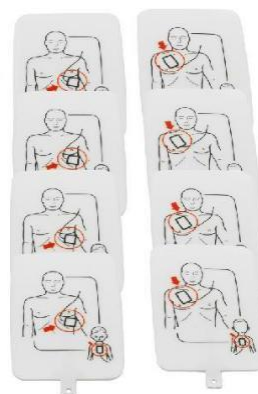

PP-UTPAD-4

Štiri pari blazinic za vadbo Odrasel/Otrok
za AED UltraTrainer

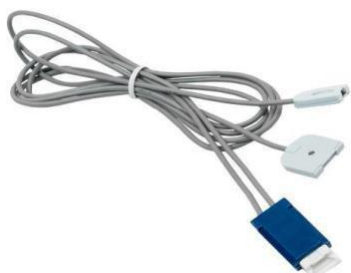

RPP-AEDUT-CABLE Rezervni
kabel s priključkom za AED
UltraTrainer



RPP-AEDUT-TRAY

Rezervni shranjevalni pladenj
za AED UltraTrainer



PP-AEDUT-101-D Angleščina/Španščina

PP-AEDUT-115-D Angleščina/Slovenščina
Jezikovni priključek za
AED UltraTrainer

Prestan AED UltraTrainer™

Ponuja funkcije, ki jih ne najdemo na nobenem univerzalnem AED trener.

Ta kompaktna in lahka enota omogoča učencem izkusiti realno izkušnjo usposabljanja z vadbenimi blazinicami, ki zaznajo, ko so nameščeni na preskusno lutko. Poleg tega so blazinice predhodno povezane, glasovni pozivi pa jasni in mirni.

Inštruktorji lahko prilagodijo svoj tečaj usposabljanja z možnostmi za vklop ali izklop metronoma in/ali vpihovalnega časa

S 3 letno garancijo in trpežnimi dolgotrajnimi blazinicami je AED UltraTrainer zasnovan za dolgo delovanje.

Prestan je prvi in edini univerzalni AED Trainer s:

- ✓ Dvojno grafiko (Odrasel/Otrok) Vadbene blazinice
- ✓ Blazinice s sistemom za zaznavanje kontakta
- ✓ Predhodno priključene blazinice
- ✓ Otroški način za vadbo
- ✓ Poseben glasovni otroški način
- ✓ Simulacija šoka polavtomatsko ali popolnoma avtomatsko
- ✓ CPR trener, "Dodaj dva vpiha" glasovno sporočilo
- ✓ Vključitev / Izključitev metronoma za kompresije
- ✓ Vključitev / Izključitev "Dodaj dva vpiha" opozorila
- ✓ Opozorilo za nizko raven baterije
- ✓ 3 letno garancijo

Ostale lastnosti:

- ✓ Dvo-jezičnost (Angleščina, Slovenščina)
- ✓ 2015 skladno s smernicami in možnostjo nadgraditve
- ✓ Gumb za predvajanje/premor
- ✓ 5 scenarijev za vadbo



Preberite več o Prestan AED™ skenirajte QR kodo za ogled videoposnetka

Prestanov produkt LLC © 2017



PRESTAN®
www.prestanproducts.com